


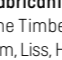
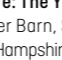


Français		Composition	
<i>Veillez lire attentivement la présente notice avant l'utilisation.</i>		Eau, extrait de graine de lin*, aloe vera*, gomme de caroube*, gomme de guar*, chlorure de sodium, gomme xanthane, sorbate de potassium, acide citrique, phénoxyéthanol.	
menoelle Gel		<i>*Composants issus de l'agriculture biologique. Biologiques à 95 %.</i>	
menoelle Gel est un gel hydratant certifié bio à base aqueuse pour la zone vaginale. menoelle Gel utilise une technologie brevetée et procure une hydratation naturelle et durable en cas de sécheresse de la muqueuse vaginale.		Protégés par brevet international.	
Mode d'emploi			
<ul style="list-style-type: none">Quand vous devez faire face à un déficit en œstrogènes (par exemple lors de la ménopause), la muqueuse vaginale asséchée peut démanger, brûler ou être irritée. Le gel menoelle Gel apporte un soulagement efficace, rapide et durable et contribue au bien-être de votre zone génitale. menoelle Gel contient un gel à base de polymères végétaux bioadhésifs permettant une adhérence naturelle aux parois vaginales et dispensant une hydratation pendant jusqu'à trois jours. Des études de cas ont montré qu'il était possible d'obtenir un effet rapide et durable avec menoelle Gel et que la zone génitale pouvait être hydratée de manière sûre et naturelle.			
apporte un soulagement des symptômes dans les cas suivants			
<ul style="list-style-type: none">Sécheresse vaginale Atrophie vaginale due à la ménopause Démangeaisons Irritations, brûlures et sensibilité Douleurs lors des rapports sexuels			
Une sécheresse vaginale temporaire peut avoir différentes causes : accouchement, allaitement, prise de pilule contraceptive ou changements hormonaux dus à la ménopause. Certains anti-dépresseurs et anti-histaminiques, de même qu'un stress grave, peuvent également contribuer à une sécheresse de la zone génitale.			
menoelle Gel:			
<ul style="list-style-type: none">un gel doux, translucide à adhérence naturelle gel discret à composants incolores, inodores et sans saveur, non collant. Correspond à la consistance et à la sensation de la lubrification vaginale naturelle le bon pH pour reconstituer et conserver une acidité protectrice dans la zone génitale et maintenir la bonne santé de la flore vaginale. formulé sans hormones formulé sans substances ou composants connus pour irriter les muqueuses tels que la glycérine, les dérivés d'hydrocarbures ou le parabène (perturbateur endocrinien) qui peuvent perturber ou affecter la santé de la flore vaginale doux et naturel, il peut s'utiliser même en cas de grande sensibilité pureté garantie avec une certification bio peut être utilisé avec des préservatifs en latex naturel et en polyisoprène reconnu par les experts de santé et par les femmes comme un soulagement bénéfique, sûr et agréable des symptômes déplaisants de la sécheresse vaginale pendant la ménopause une alternative naturelle et sans hormones aux gels vaginaux hydratants synthétiques et chimiques			
Une sécheresse vaginale peut être constatée après un traitement anti-cancéreux (opération ou chimiothérapie). Le gel menoelle peut aussi être appliqué sur des tissus sensibles aux hormones et hydrater des muqueuses génitales sensibles ou endommagées. Le gel peut également être utilisé avec un dilateur, dans le cadre d'un traitement anti-cancéreux ou autre.			
Contact			
Importé et distribué par : PhytoLife Nutrition GmbH Winsstrasse 59 10405 Berlin Allemagne			
Fabricant : The YES YES Company Ltd. The Timber Barn, Selborne Road Greatham, Liss, Hampshire GU33 6HG Royaume Uni			
  			
Contact : www.menoelle.com hello@menoelle.com			

Italiano		Composizione	
<i>Leggere attentamente il foglietto illustrativo prima dell'uso.</i>		Acqua, estratto di semi di lino*, aloe vera*, farina di semi di carruba*, goma di guar*, cloruro di sodio, gomma di xantano, sorbato di potassio, acido citrico, fenossietanolo.	
menoelle Gel		<i>*Ingredienti da agricoltura biologica. Prodotto biologico al 95%.</i>	
menoelle Gel è un gel idratante per l'ambiente vaginale a base d'acqua, con certificazione biologica. menoelle Gel impiega una tecnologia brevettata che consente l'idratazione naturale e prolungata della mucosa vaginale secca.		Brevetto internazionale.	
Uso			
<ul style="list-style-type: none">Quando (ad es. in menopausa) il livello di estrogeni diminuisce, la secchezza della mucosa vaginale può provocare prurito, bruciori o irritazioni. menoelle Gel svolge un'azione efficace, rapida e prolungata, donando benessere alle parti intime. menoelle Gel contiene un gel naturale a base di polimeri vegetali che aderisce alla parete vaginale e mantiene idratate le parti intime fino a tre giorni. Gli studi specifici hanno dimostrato che menoelle Gel garantisce risultati rapidi, efficaci e di lunga durata, idratando le parti intime in modo naturale e sicuro.			
menoelle Gel lenisce i sintomi dovuti a:			
<ul style="list-style-type: none">secchezza vaginale atrofia vaginale in menopausa prurito irritazione, bruciore e ipersensibilità dolore durante i rapporti sessuali.			
Una secchezza vaginale temporanea può avere diverse cause: parto, allattamento, assunzione della pillola anticoncezionale o modificazioni ormonali in menopausa. Anche determinati farmaci antidepressivi o antistaminici o lo stress estremo possono comportare la secchezza delle parti intime.			
menoelle Gel:			
<ul style="list-style-type: none">gel adesivo delicato, trasparente e naturale discreto, incolore, inodore, privo di aromatizzanti; non appiccicoso. Affine alla mucosa vaginale per consistenza e azione lubrificante valore di pH corretto, per ripristinare e mantenere la percentuale acida protettiva delle parti intime e sostenere una flora vaginale sana non contiene ormoni non contiene sostanze nate in grado di irritare la mucosa quali glicerina, derivati del petrolio o parabeni (imitatori ormonali) che influiscono sull'equilibrio della flora vaginale o la danneggiano. delicata e naturale, adatto anche in caso di elevata sensibilità purezza garantita in quanto prodotto biologico certificato utilizzabile in combinazione con preservativi in lattice naturale e poliisoprene apprezzato dai medici e dalle donne per l'azione benefica, sicura e lenitiva in caso di sgradevoli sintomi dovuti alla secchezza vaginale tipica della menopausa l'alternativa naturale e priva di ormoni ai gel vaginali idratanti a base chimica e sintetica.			
La secchezza vaginale può verificarsi quale conseguenza di cure oncologiche (intervento chirurgico o chemioterapia). menoelle Gel può essere applicato anche ai tessuti ormono-sensibili e svolge azione idratante sulle parti intime delicate o lesionate. menoelle Gel può essere impiegato anche nel quadro di eventuali cure oncologiche, anche utilizzando un dilatatore.			
Recapiti			
Importatore e distributore: PhytoLife Nutrition GmbH Winsstrasse 59 10405 Berlino Germania			
Produttore: The YES YES Company Ltd. The Timber Barn, Selborne Road Greatham, Liss, Hampshire GU33 6HG Regno Unito			
  			
Recapiti: www.menoelle.com hello@menoelle.com			

Español		Composición	
<i>Lea atentamente este prospecto antes de utilizar el producto.</i>		Agua, extracto de linaza*, Aloe vera*, goma garrofin*, goma guar*, cloruro de sodio, goma xantana, sorbato de potasio, ácido cítrico y fenoxietanol.	
menoelle Gel		<i>*Ingredientes de cultivo ecológico 95 % ecológico</i>	
menoelle Gel es un gel hidratante para la zona vaginal, con base acuosa y certificación ecológica. Utiliza una tecnología patentada y proporciona hidratación natural y duradera en la mucosa vaginal seca.		Protección de patente internacional.	
Aplicación			
<ul style="list-style-type: none">Cuando se produce una falta de estrógenos (p. ej., durante la menopausia), la mucosa vaginal seca puede producir picor, escozor o irritación. menoelle Gel proporciona un alivio eficaz, rápido y duradero, y garantiza el bienestar de la zona íntima. menoelle Gel contiene un polímero vegetal bioadhesivo que se adhiere a las paredes vaginales y proporciona hidratación durante un periodo de hasta tres días. En varios estudios se ha demostrado que menoelle Gel contribuye a lograr un efecto rápido y duradero, ya que hidrata la zona íntima de manera segura y natural.			
Frecuencia de aplicación			
Por lo general, una aplicación de 5 ml cada 2 o 3 días es suficiente para mantener los tejidos vaginales hidratados y saludables.			
Alivio sintomático en los casos siguientes:			
<ul style="list-style-type: none">Sequedad vaginal Atrofia vaginal menopáusica Picor Irritación, ardor y sensibilidad Dolor durante las relaciones sexuales			
Las causas de la sequedad vaginal transitoria son muy diversas: el parto, la lactancia, la píldora o los cambios hormonales que se producen durante la menopausia. Asimismo, determinados antidepressivos y antihistamínicos, al igual que el estrés extremo, pueden provocar sequedad en la zona íntima.			
Observaciones			
Isotónico*: la propiedad isotónica/isoosmótica de menoelle Gel se corresponde con la del tejido humano. ¿Por qué es importante este equilibrio? Los productos hipertónicos (que suelen contener sustancias químicas como la glicerina y el glicol) pueden causar irritación en la zona íntima. Gracias a su propiedad isotónica/isoosmótica*, menoelle Gel protege frente a las irritaciones.			
*Encontrará más información en nuestro sitio web.			
menoelle Gel:			
<ul style="list-style-type: none">Gel adhesivo suave, transparente y natural Es discreto, incoloro e inodoro, no deja ningún sabor y no es pegajoso. Tiene la misma consistencia y el mismo tacto que la lubricación vaginal natural Tiene un valor del pH adecuado para restablecer y mantener la acidez protectora de la zona íntima, favorece una microflora vaginal saludable No contiene hormonas No contiene sustancias conocidas que irritan la mucosa ni componentes como la glicerina, los derivados del petróleo o los parabenos (limitadores de hormonas), que pueden alterar o poner en peligro la salud de la microflora vaginal Suave y natural, también es apto en los casos de alta sensibilidad Higiene garantizada con certificación ecológica. Es compatible con los preservativos de látex natural y poliisopreno Ha sido probado por expertos sanitarios y mujeres para un alivio agradable, seguro y confortable de los síntomas molestos de la sequedad vaginal durante la menopausia Es una alternativa natural (sin hormonas) a los geles hidratantes para la zona íntima elaborados con sustancias sintéticas y químicas			
Después de un tratamiento oncológico (operación o quimioterapia), es posible sufrir sequedad vaginal. menoelle Gel también se puede aplicar en tejidos sensibles a los hormonas e hidrata los tejidos íntimos sensibles o dañados. Asimismo, se puede utilizar con dilataores, independientemente de si estos forman parte o no de un tratamiento de recuperación del cáncer.			
Contacto			
Distribuidor e importador: PhytoLife Nutrition GmbH Winsstrasse 59 10405 Berlín Alemania			
Fabricante: The YES YES Company Ltd. The Timber Barn, Selborne Road Greatham, Liss, Hampshire GU33 6HG Reino Unido			
  			
hello@menoelle.com hello@menoelle.com			

РУССКИЙ		СОСТАВ	
Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед применением.		Вода, экстракт семян льна*, алоэ вера*, камедь плодов рожкового дерева*, гуаровая камедь*, хлорид натрия, ксантановая смола, сорбат калия, лимонная кислота, феноксизтанол.	
ГЕЛЬ МЕНОЭЛЬ (MENOELLE GEL)		<i>*Ингредиенты из органического производства. На 95 % органический продукт.</i>	
Гель меноэль — это сертифицированный органический увлажняющий гель на водной основе для влагалища. Гель разработан по запатентованной технологии и обеспечивает естественное увлажнение сухой слизистой оболочки влагалища в течение длительного времени.		Продукт защищен международными патентами.	
ПРИМЕНЕНИЕ			
<ul style="list-style-type: none">При дефиците эстрогена (например, во время менопаузы) в сухой слизистой влагалища может появляться зуд, жжение или раздражение. Гель меноэль обеспечивает эффективное, быстрое и длительное смягчение симптомов и обеспечивает комфорт в интимной зоне. Данное средство представляет собой натуральный густой гель, изготовленный из биоадгезивных растительных полимеров, который плотно прилегает к стенкам влагалища и обеспечивает увлажнение до трех дней. Целевые исследования показали, что гель меноэль безопасно и естественным образом увлажняет интимную зону, обеспечивая при этом быстрый и длительный эффект.			
ГЕЛЬ МЕНОЭЛЬ ОБЛЕГЧАЕТ СИМПТОМЫ ПРИ:			
<ul style="list-style-type: none">сухости во влагалище; вагинальная атрофия во время менопаузы; зуде; раздражении, жжении и повышенной чувствительности; болях во время полового акта.			
Временная сухость влагалища может возникать по нескольким причинам: рождение ребенка, лактация, прием оральных контрацептивов или гормональная перестройка организма во время менопаузы. Сухость в интимной зоне могут вызывать некоторые антидепрессанты и антигистаминные препараты, а также повышенный стресс.			
ГЕЛЬ МЕНОЭЛЬ:			
<ul style="list-style-type: none">мягкий, прозрачный и натуральный густой гель; деликатный, не содержит красителей, отдушек и вкусовых добавок, не прилипает. По органолептическим показателям и консистенции соответствует слизистой оболочке влагалища; сбалансированный уровень pH для восстановления и поддержания благоприятной кислотной среды в интимной зоне, обеспечивает здоровую микрофлору во влагалище; не содержит гормонов; не содержит известных раздражителей слизистой оболочки и таких ингредиентов, как глицерин, нефтепродукты, parabены (имитаторы гормонов), которые могут нарушить или поставить под угрозу здоровье интимной флоры; деликатный и натуральный, подходит также и для высокочувствительной кожи; гарантированная чистота с сертифицированным статусом биопродукта; может использоваться вместе с презервативами из натурального латекса и полиизопрена; медицинскими специалистами и женщинами подтверждено мягкое, безопасное и комфортное облегчение неприятных симптомов сухости влагалища во время менопаузы; натуральная альтернатива синтетическим и химическим увлажняющим гелям для интимной гигиены, не содержит гормонов.			
Сухость влагалища может появиться после прохождения курса лечения онкологических заболеваний (хирургическая терапия или химиотерапия). Гель меноэль также может наноситься на чувствительные к гормонам ткани и применяться для увлажнения сенсibilизированных или поврежденных тканей интимных органов. Гель также может использоваться с дилатором в рамках терапии онкологического заболевания.			
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ			
Сбыт и импорт: PhytoLife Nutrition GmbH Winsstrasse 59 10405 Berlino г. Берлин			
Производитель: The YES YES Company Ltd. The Timber Barn, Selborne Road Greatham, Liss, Hampshire GU33 6HG Великобритания.			
www.menoelle.com hello@menoelle.com			

	
	
	
	
	
	
Vaginales Feuchtigkeitsgel mit Langzeitwirkung long-lasting vaginal moisturizer	Vaginales Feuchtigkeitsgel mit Langzeitwirkung long-lasting vaginal moisturizer

Deutsch	Inhaltsstoffe
<i>Bitte lesen Sie dieses Merkblatt vor der Verwendung sorgfältig durch.</i>	Wasser, Leinsamenextrakt*, Aloe Vera*, Johannisbrotkernmehl*, Guarkernmehl*, Natriumchlorid, Xanthangummi, Kaliumsorbat, Zitronensäure, Phenoxyethanol.
menoelle Gel	<i>*Inhaltsstoffe aus biologischem Anbau. 95 %-ig biologisch.</i>
menoelle Gel ist ein bio-zertifiziertes Feuchtigkeitsgel auf Wasserbasis für den Vaginalbereich. menoelle Gel verwendet eine patentierte Technologie und spendet natürliche, langanhaltende Feuchtigkeit bei trockener Vaginalschleimhaut.	Internationaler Patentschutz.
<ul style="list-style-type: none"> Wenn es (z.B. in den Wechseljahren) zu einem Östrogenmangel kommt, kann die trockene Vaginalschleimhaut jucken, brennen oder gereizt sein. menoelle Gel führt zu einer wirksamen, schnellen und langanhaltenden Linderung und sorgt für Wohlbefinden im Intimbereich. menoelle Gel enthält ein natürliches Haftgel aus pflanzlichen Polymeren, welches an den Scheidenwänden haftet und bis zu drei Tage Feuchtigkeit spendet. Fallstudien haben gezeigt, dass mit menoelle Gel eine schnelle und langanhaltende Wirkung erzielt werden kann und der Intimbereich sicher und natürlich mit Feuchtigkeit versorgt wird. 	Anwendung
Verschafft symptomatische Linderung bei:	Anwendungshäufigkeit menoelle Gel
<ul style="list-style-type: none"> Vaginaler Trockenheit Vaginaler Alterung in den Wechseljahren Juckreiz Reizung, Brennen und Empfindlichkeit Sexualschmerzen. 	Eine Anwendung von 5ml alle 2-3 Tage ist in der Regel ausreichend, um die Vaginalschleimhaut feucht und angenehm zu halten. Bei starker Trockenheit kann das Gel anfangs häufiger (1x alle 1-2 Tage aufrufen) verwendet werden, bis sich eine Besserung einstellt. Zur Erleichterung von schmerzhaftem Geschlechtsverkehr das Gel vor dem Geschlechtsverkehr und zur Linderung danach aufrufen.
	Hinweise
menoelle Gel:	isotonisch* : Die isotonische/isoosmotische Eigenschaft von menoelle Gel entspricht der des menschlichen Gewebes. Warum ist dieses Gleichgewicht wichtig? Hypertonische Produkte (die in der Regel Chemikalien wie Glycerin und Glykol enthalten) können im Intimbereich Reizungen verursachen. Durch die isotonische/isoosmotische* Eigenschaft schützt menoelle Gel vor Reizungen.
<ul style="list-style-type: none"> sanftes, durchsichtiges und natürliches Haftgel diskret ohne Farb-, Geruchs- und Geschmacksstoffe und klebt nicht. Entspricht in Konsistenz und Gefühl der natürlichen Gleitfähigkeit richtiger pH-Wert zur Wiederherstellung und Aufrechterhaltung des schützenden Säuregehalts im Intimbereich, unterstützt eine gesunde Vaginalflora frei von Hormonen hergestellt frei von bekannten schleimhautreizenden Stoffen und Inhaltsstoffen wie Glycerin, Erdölzerzeugnissen, Parabenen (Hormon-Nachahmer), die die Gesundheit der Intimflora stören oder gefährden können sanft und natürlich, auch bei hoher Empfindlichkeit geeignet garantierte Reinheit mit zertifiziertem Bio-Status kann zusammen mit Kondomen aus Naturlatex und Polyisopren verwendet werden bewährt bei Gesundheitsexperten und Frauen zur wohltuenden, sicheren und angenehmen Linderung von unangenehmen Symptomen bei vaginaler Trockenheit in den Wechseljahren eine hormonfreie, natürliche Alternative zu synthetischen und chemischen Feuchtigkeitsgelen für den Intimbereich. 	isotonisch* : Die isotonische/isoosmotische Eigenschaft von menoelle Gel entspricht der des menschlichen Gewebes. Warum ist dieses Gleichgewicht wichtig? Hypertonische Produkte (die in der Regel Chemikalien wie Glycerin und Glykol enthalten) können im Intimbereich Reizungen verursachen. Durch die isotonische/isoosmotische* Eigenschaft schützt menoelle Gel vor Reizungen.
Aufbewahrung: Bewahren Sie die Tube bei Nichtverwendung mit verschlossenem Deckel auf. Heben Sie menoelle an einem kühlen und trockenen Ort bei einer Temperatur zwischen +5 und +30 °C auf. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Verwenden Sie es vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums.	Wichtig: Wenn das Sicherheitssiegel einer enthaltenen Tube beschädigt oder geöffnet ist, verwenden Sie sie NICHT, sondern bringen Sie sie dorthin zurück, wo Sie sie erworben haben. Wenn Reizungen oder Unwohlsein auftreten, beenden Sie die Anwendung. Sollten die Symptome anhalten, suchen Sie einen Arzt auf.
<i>Nicht kompatibel mit Polyurethan-Kondomen.</i>	Biozertifiziert durch: The Soil Association, Bristol, UK.
Genehmigt durch: The Vegetarian Society.	Vertrieb
Import und Vertrieb: PhytoLife Nutrition GmbH Winsstrasse 59 10405 Berlin Deutschland	Hersteller: The YES YES Company Ltd. The Timber Barn, Selborne Road Greatham, Liss, Hampshire GU33 6HG UK
XIVUML_06/2021	

Kontakt: www.menoelle.com hello@menoelle.com

English	Ingredients
<i>Please read these instructions carefully before use.</i>	Water, linseed extract*, aloe vera*, locust bean gum*, guar gum*, sodium chloride, xanthan gum, potassium sorbate, citric acid, phenoxyethanol.
menoelle Gel	<i>*Certified organic ingredients. 95 % organic.</i>
menoelle Gel is a certified organic moisturising gel for vaginal use. menoelle Gel uses patented technology and combats vaginal dryness with natural, long-lasting rehydration.	International patent protection.
<ul style="list-style-type: none"> When oestrogen levels drop, e.g. during menopause, this can lead to vaginal irritation, itching and burning sensations. menoelle Gel provides effective, swift and long-lasting relief and ensures physical comfort. menoelle Gel uses bio-adhesive plant polymer that binds to the vaginal walls and provides hydration for up to three days. Case studies have shown that menoelle Gel achieves a fast and long-lasting result and hydrates the vagina in a safe and natural way. 	International patent protection.
Use	Use
menoelle Gel is a gentle, colourless gel that can be simply applied and distributed with your finger tips (no applicator supplied). Therefore, you can decide yourself, how much and where you wish to apply it. Squeeze the desired amount of gel from the tube and distribute it with your fingertips to the inside walls of your vagina. menoelle Gel can also be used to moisten the lips of the vagina. Product does not come with a reusable applicator.	menoelle Gel is a gentle, colourless gel that can be simply applied and distributed with your finger tips (no applicator supplied). Therefore, you can decide yourself, how much and where you wish to apply it. Squeeze the desired amount of gel from the tube and distribute it with your fingertips to the inside walls of your vagina. menoelle Gel can also be used to moisten the lips of the vagina. Product does not come with a reusable applicator.
Frequency of use	Frequency of use
Application of 5 ml every two to three days is usually enough to keep vaginal tissues hydrated and comfortable. In cases of extreme dryness, the gel can initially be used more frequently (1x every one to two days), until there is an improvement. For easing pain during sexual intercourse, the gel should be applied before intercourse and again afterwards to provide relief.	Application of 5 ml every two to three days is usually enough to keep vaginal tissues hydrated and comfortable. In cases of extreme dryness, the gel can initially be used more frequently (1x every one to two days), until there is an improvement. For easing pain during sexual intercourse, the gel should be applied before intercourse and again afterwards to provide relief.
Notice	Notice
menoelle Gel:	isotonisch* : The isotonic/iso-osmotic property of menoelle Gel is the same as that of human tissue. Why is this balance necessary? Hypertonic products (which generally contain chemicals like glycerine and glycol) can cause vaginal irritation. menoelle Gel 's isotonic/iso-osmotic property protects against irritation.
<ul style="list-style-type: none"> a gentle, clear and natural bio-adhesive gel discreet, non-sticky, colourless, fragrance and taste free. Mimics the consistency and feel of the body's natural vaginal lubrication the correct pH for restoring and maintaining the protective acidity level in the vagina, fosters a healthy vaginal flora is not made with hormones not made with any substances known to irritate mucous membranes, and free from ingredients such as glycerine, oil and petroleum-based products, parabens (hormone mimics) that may alter or damage the healthy vaginal flora. gentle and natural, suitable even in cases of extreme sensitivity guaranteed pure with certified organic status safe for use with condoms made of latex and polyisoprene proven by health experts and by women to provide soothing, safe and pleasant relief from the uncomfortable symptoms caused by vaginal dryness during menopause a hormone-free, natural alternative to synthetic and chemical vaginal rehydration gels. 	isotonisch* : The isotonic/iso-osmotic property of menoelle Gel is the same as that of human tissue. Why is this balance necessary? Hypertonic products (which generally contain chemicals like glycerine and glycol) can cause vaginal irritation. menoelle Gel 's isotonic/iso-osmotic property protects against irritation.
Storage: When not in use, always store the tube with the lid closed. Store menoelle Gel in a cool, dry place at temperatures of between +5 and +30 °C. Protect against direct sunlight. Use before expiry date. Caution: menoelle Gel is neither a spermicide nor a contraceptive.	Warning: If the seal on any tube enclosed is damaged or opened DO NOT use, return to place of purchase. If irritation or discomfort occurs, discontinue use. If symptoms persist, seek medical advice.
<i>Not compatible with polyurethane condoms.</i>	Not compatible with polyurethane condoms.
Certified organic by: The Soil Association, Bristol, UK.	Certified organic by: The Soil Association, Bristol, UK.
Approved by: The Vegetarian Society.	Approved by: The Vegetarian Society.
Distributor	Distributor
Distributor and import: PhytoLife Nutrition GmbH Winsstrasse 59 10405 Berlin Germany	Distributor and import: PhytoLife Nutrition GmbH Winsstrasse 59 10405 Berlin Germany
Manufacturer: The YES YES Company Ltd. The Timber Barn, Selborne Road Greatham, Liss, Hampshire GU33 6HG UK	Manufacturer: The YES YES Company Ltd. The Timber Barn, Selborne Road Greatham, Liss, Hampshire GU33 6HG UK

Contact: www.menoelle.com hello@menoelle.com

Türkçe	İçindekiler
<i>Kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kullanımı talimatını dikkatle okuyun.</i>	Su, keten tohumu özü*, aloe vera*, keçiboynuzu tozu*, guar çekirdeği tozu*, sodyum klorür, ksantan zamkı, potasyum sorbat, sitrik asit, fenoksietanol.
menoelle Jel	<i>*Organik tarımla üretilen bileşimler. %95 organik.</i>
menoelle Jel , vajinal bölge için su bazlı organik sertifikalı nemlendirici bir jeldir. menoelle Jel potentli bir teknolojiyi kullanır ve kuru vajinal mukozada doğal ve uzun süreli nemlendirme sağlar.	Uluslararası korumalı patent.
<ul style="list-style-type: none"> Östrojen eksikliği nedeniyle (örneğin menopoz döneminde) kurumuş vajina mukozasında kaşıntı, yanma ve tahriş oluşabilir. menoelle Jel etkili, hızlı ve kalıcı rahatlama sağlar ve genital bölgenin sağlığını korur. menoelle Jel vajina duvarına yapışan ve üç güne kadar nemli kalmasını sağlayan bitkisel polimerlerin oluşturduğu doğal yapışkan jel içerir. Araştırmalar menoelle Jel ile hızlı ve uzun süreli kalıcı bir etki elde edilebileceğini, genital bölgede güvenli ve doğal bir nemlendirme sağlandığını göstermiştir. 	Uluslararası korumalı patent.
menoelle Jel kullanım sıklığı	Kullanımı
Genellikle 2-3 günde bir 5 ml kullanım genital floranın nemli ve rahatlamış halde kalması için yeterlidir. Aşırı kuruluk varsa jel başlangıçta, iyileşme başlayana kadar daha sık (1-2 günde 1 kez) uygulanabilir. Jeli ağrılı cinsel ilişkiyi kolaylaştırmak için ilişki öncesinde ve ağrıyı azaltmak için de ilişki sonrasında kullanın.	menoelle Jel parmakla ya da aplikatörle kolayca uygulanabilir ve dağıtılabilen yumuşak, saydam bir jeldir. Bu sayede, nereye ve ne kadar uygulayacağınıza kendiniz karar verebilirsiniz. İsteddiğiniz miktarı tüpü sıkarak çıkarın ve parmak uçlarınızla vajinal mukozaya dağıtın. menoelle Jel genital dudakların nemlendirilmesi için de kullanılabilir.
menoelle Jel aşağıda belirtilen semptomların azalmasında etkilidir:	menoelle Jel'in kullanım sıklığı
<ul style="list-style-type: none"> Vajinal kuruluk menopozla bağlı vajinal atrofi Kaşıntı Tahriş, yanma ve hassasiyet Cinsel ilişki sırasında ağrı 	Genellikle 2-3 günde bir 5 ml kullanım genital floranın nemli ve rahatlamış halde kalması için yeterlidir. Aşırı kuruluk varsa jel başlangıçta, iyileşme başlayana kadar daha sık (1-2 günde 1 kez) uygulanabilir. Jeli ağrılı cinsel ilişkiyi kolaylaştırmak için ilişki öncesinde ve ağrıyı azaltmak için de ilişki sonrasında kullanın.
Geçici vajinal kuruluğun çeşitli sebepleri olabilir: Doğum, emzirme, doğum kontrol hapları ya da menopoz dönemindeki hormonal değişimler. Ayrıca bazı antidepressan ve antihistaminik ilaçlarla aşırı stres de genital bölgede kuruluğa yol açabilir.	İpucu
menoelle Jel:	izotonik* : menoelle Jel'in izotonik/izootomatik özelliği insan dokusuyla uyumludur. Bu denge neden önemlidir? Hipertonik ürünler (genelde gliserin ve glükol gibi kimyasallar içeren ürünler) genital bölgede tahrişe sebep olabilir. menoelle Jel izotonik/izootomatik* özelliği sayesinde tahrişlere karşı koruma sağlar.
<ul style="list-style-type: none"> Yumuşak, saydam ve doğal yapışkan jel Rengi, kokusu ve tadı olmadığından fark edilmeyen bir jeldir ve yapışmaz. Vajinal mukozaya yapışma ve hassasiyetine uygundur. Doğru pH değeriyle genital bölgedeki koruyucu asit oranının oluşmasına ve korunmasına, sağlıklı vajina florasına destek olur. Hormon içermez Genital floranın sağlığını bozan ya da tehdit eden gliserin, petrol bazlı ürünler, parabenler (hormon taklitleri) gibi bilinen, mukozayı tahriş edici maddeler ve bileşenler içermez. Yumuşak ve doğaldır, aşırı hassasiyette bile kullanımı uygundur Organik sertifikalı garantili saf içerikli dir Doğal lateks ve polizopren prezervatiflerle birlikte kullanılabilir. Sağlık uzmanları ve kadınlarda, rahatlatıcı, hoş bir his bırakan güvenli etkisiyle menopozda vajinal kuruluğun rahatsız edici belirtilerini azalttığı kanıtlanmıştır. Genital bölge için sentetik ve kimyasal nemlendirici jellerin hormonsuz, doğal bir alternatiftir. 	izotonik* : menoelle Jel'in izotonik/izootomatik özelliği insan dokusuyla uyumludur. Bu denge neden önemlidir? Hipertonik ürünler (genelde gliserin ve glükol gibi kimyasallar içeren ürünler) genital bölgede tahrişe sebep olabilir. menoelle Jel izotonik/izootomatik* özelliği sayesinde tahrişlere karşı koruma sağlar.
Storage: When not in use, always store the tube with the lid closed. Store menoelle Gel in a cool, dry place at temperatures of between +5 and +30 °C. Protect against direct sunlight. Use before expiry date. Caution: menoelle Gel is neither a spermicide nor a contraceptive.	Saklama: Kullanmadığınız zaman tüpü ağzını kapalı tutarak saklayın. menoelle Jel'i 5°C-30°C arasında serin ve kuru bir yerde saklayın. Direkt güneş ışığından koruyun. Son kullanma tarihinden sonra kullanmayın.
<i>Not compatible with polyurethane condoms.</i>	Dikkat: menoelle Jel spermisit veya doğum kontrol aracı değildir.
Certified organic by: The Soil Association, Bristol, UK.	Uyarı: Güvenlik etiketi hasar görmüş veya açılmış tüpleri KULLANMAYIN ve aldığınız yere iade edin. Tahriş veya ağrı olursa kullanmaya devam etmeyin ve bir doktora danışın.
Approved by: The Vegetarian Society.	Poliüretan prezervatifle beraber kullanım için uygun değildir.
Distributor	Organik sertifikaya sağlayıcı: The Soil Association, Bristol, Birleşik Krallık.
Distributor and import: PhytoLife Nutrition GmbH Winsstrasse 59 10405 Berlin Germany	Onaylayan: The Vegetarian Society.
Manufacturer: The YES YES Company Ltd. The Timber Barn, Selborne Road Greatham, Liss, Hampshire GU33 6HG UK	İletişim
	Satış ve Dağıtım: PhytoLife Nutrition GmbH Winsstrasse 59 10405 Berlin Almanya
	Üretici: The YES YES Company Ltd. The Timber Barn, Selborne Road Greatham, Liss, Hampshire GU33 6HG Birleşik Krallık

İletişim: www.menoelle.com hello@menoelle.com

menoelle PRODUKTFAMILIE	
	menoelle GEL e 100 ml
	menoelle GEL ist ein bio zertifiziertes vaginalgel aus rein pflanzlichen Polymeren, welches an den Scheidenwänden haftet und bis zu 3 Tage Feuchtigkeit spendet. menoelle Gel wurde für die sensible Intimflora entwickelt und ist frei von hautschädigenden, chemischen Wirkstoffen.
<ul style="list-style-type: none"> Lindert schnell vaginale Atrophie und Trockenheit Mildert Reizungen, Juckreiz und Brennen Spendet sanfte, langanhaltende Feuchtigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> BIO ZERTIFIZIERT OHNE HORMONE VEGAN
	menoelle TABLETTEN 60 Tabletten
	menoelle Tabletten bestehen aus einer patentierten und pflanzlichen Mischung der drei Pflanzenextrakte <i>Cynanchum wilfordii</i> , <i>Phlomis umbrosa</i> und <i>Angelica gigas (EstroG-100®)</i> .
<ul style="list-style-type: none"> Mit dem patentierten und pflanzlichen EstroG-100® Extrakt Mit einem aufeinander abgestimmten hochwertigen Nährstoffkomplex Frei von Isoflavonen, hormonfrei, veganes Produkt 	<ul style="list-style-type: none"> VEGAN OHNE SOJA OHNE ISOFLAVONE
	menoelle OVULA med 10 Zäpfchen
	menoelle Ovula med ist ein Medizinprodukt zur Vorbeugung und Behandlung von vaginaler Trockenheit. Hilft bei Reizungen, Brennen und Juckreiz.
<ul style="list-style-type: none"> Zur Wiederherstellung und zum Erhalt des natürlichen vaginalen pH-Werts. Zur Wiederherstellung und Aufrechterhaltung vaginaler Gesundheit. Hormonfrei und frei von chemischen Konservierungsstoffen 	<ul style="list-style-type: none"> SICHER & WIRKSAM MEDIZINPRODUKT OHNE HORMONE
	DIE CLEVERE APP FÜR FRAUEN IN DEN WECHSELJAHREN!
	<i>mimeno ist die erste kostenlose App speziell für Frauen vor, während und nach den Wechseljahren, also für alle Frauen von Anfang 40 bis Mitte / Ende 60.</i>
<ul style="list-style-type: none"> Menopausen-Tracking, das Wechseljahresbeschwerden übersichtlich erfasst und Therapiemöglichkeiten anbietet Spannende, relevante Informationen zu den unterschiedlichsten Themen rund um die Wechseljahre Ein individuelles Trainingsprogramm für Körper und Geist Austausch mit anderen Frauen in einer geschützten Community 	<ul style="list-style-type: none"> Code scannen und kostenlos dieApp laden: <ul style="list-style-type: none">
www.mimeno.com	

www.mimeno.com